

RP - Alarm - Trittmatte

Die neue Alarm-Trittmatte von Reha Partner eignet sich besonders gut für verschiedene Aufgaben der Patienten- und Zugangskontrolle.

Kernstück des einsatzbereiten Systems ist eine Trittmatte ca. 700 x 400 mm groß und nur 3 mm dick. Weiterhin gehören der Sender, ein Empfänger für optische und akustische Warnung, eine Abdeckmatte sowie eine Antirutschplatte zur Verbesserung der Rutschsicherheit bei glattem Boden zu dem Komplett-System.

Bereits ein Gewicht von 10 kg reicht für den Auslöseimpuls aus. Die Übertragung des Impulses erfolgt per Funk zu einem Empfänger für optische oder akustische Warnung. Der Empfänger kann bis zu 150 Meter entfernt platziert werden und das System arbeitet mit einer ungefährlichen elektrischen Niederspannung.

Die RP Alarm-Trittmatte ist für die unterschiedlichsten Kontroll-Fälle geeignet. Das System ist im Privathaushalt genauso gut wie in der Pflegeeinrichtung einsetzbar. Zu den üblichsten Einsatzfällen gehört:


- Verlassen der Wohnung oder des Hauses
- Aufstehkontrolle bei Verlassen des Bettes
- Betreten von Badezimmer, Küche, Balkon, usw..
- Ankunfts meldung vor Erreichen des Gemeinschaftsraumes, des Behandlungsraumes, usw...

Ob Demenz, Schlafwandeln, allgemeine Gebrechlichkeit oder ähnliche Leiden zu einer situationsbedingten Betreuungsbedürftigkeit führen, auf jeden Fall bleibt die Eigenständigkeit des Patienten durch unser System weitestgehend erhalten.

Erst bei Eintritt der Betreuungssituation wie Verlassen des Bettes, Betreten des Badezimmers oder Verlassen des Wohnbereichs wird der Betreuer herbeigerufen und kann die erforderliche Hilfestellung geben.

Gern kommt ein Fachhändler oder wir zu Ihnen / Ihrem Patienten für eine unverbindliche Vorführung.

Fordern Sie uns einfach an, Anruf genügt!

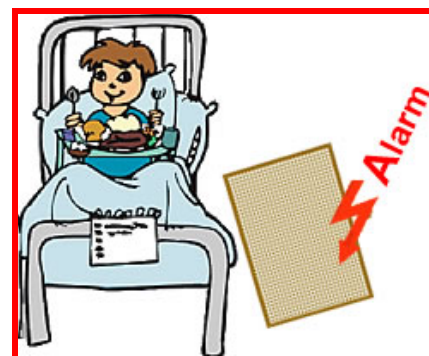

Das Standard-Komplett-System ist ideal für die Nutzung in jedem privaten Haushalt. Als Artikelnummer 570 000 enthält es folgende Teile:

- Alarm-Trittmatte mit Kabel
- Abdeckmatte grau als Deckbelag
- Antirutschplatte orange
- Batterie Sender mit Ein-/Ausschalter
- Batterie Empfänger als akustisch / optischer Alarmgeber



Trittmatte mit Kabel

Selbstverständlich können die Komponenten auch individuell für besondere Anwendungen zusammengestellt werden. Zu den gängigen Anwendungen zählen:

- Anschluss bis zu 6 Trittmatten an einen Empfänger
- Anschluss der Trittmatten an eine zentrale Rufanlage
- Kabelverbindung zwischen Trittmatte und Empfänger
- 220 Volt Transformator statt Batteriebetrieb
- Nutzung anderer Trittmattengrößen



Sender

Standard-Einzelkomponenten sind:

570 100	Alarm-Trittmatte mit 2,5 m Kabel und Stecker
570 200	Batterie-Sender mit Ein / Ausschalter f. 1-Kanal
570 210	Batterie-Sender mit Ein / Ausschalter f. 6-Kanal
570 220	Netzteil-Sender mit Ein / Ausschalter f. 6-Kanal
570 300	1-Kanal Batterie Empfänger akustisch / optisch
570 320	6-Kanal Batterie Empfänger akustisch / optisch
570 340	passendes Netzteil für 6-Kanal Empfänger
570 400	Abdeckmatte in grau ca. 90 x 60 cm
570 500	Antirutschplatte ca. 40 x 60 cm
570 010	5 m Verlängerungskabel mit Stecker



1-Kanal-Empfänger mit akustischen / optischen Alarm

Weitere Ergänzungssteile auf Anfrage!

Alle Informationen Stand September 2009.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Produkt wird partnerschaftlich vertrieben von:

Reha Partner GmbH und:
 Carl-Zeiss-Straße 9-11
 30827 Garbsen
 Tel: 05131 4949-0
 Fax: 05131 494949
 Email: info@reha-partner.de
www.reha-partner.de

SAFE PART
 Inhaber Wolfgang Oehlert
 Rastenburger Strasse 7
 31789 Hameln
 Tel: 05151 822231
 Fax: 05151 822232
 Email: safepart@aol.com
www.safepart.de



6-Kanal-Empfänger mit akustischen / optischen Alarm

Ihr Fachhändler berät Sie gern: